

## Drogen

Multi-Schnelltest zum Nachweis von 6 verschiedenen Drogen

5 min



Sensitivität  
> 96 %



### Drogen – Suchtmittel mit Nebenwirkungen

Drogen sind psychoaktive Substanzen, die das Verhalten und die Stimmung des jeweiligen Konsumenten beeinflussen. Mit dem Konsum einer oder mehrerer Drogen gehen allerdings nicht unerhebliche Gefahren einher. Langfristig sind Beeinträchtigungen der körperlichen Gesundheit sowie psychosoziale Problematiken in Folge einer etwaigen Sucht zu erwarten.

### Wissen, woran man ist: Drogen Multi-Schnelltest

Mit dem Drogen Multi-Schnelltest können anhand einer Urinprobe schnell und sicher Anzeichen für den Missbrauch von **Amphetaminen, Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel), Kokain, Marihuana (THC), Methadon sowie von Opiaten** nachgewiesen werden. Der Test gibt Auskunft, welche Drogen konsumiert wurden.

### Wie verlässlich ist der Veroval® Test?

Der Drogen Multi-Schnelltest wurde mit dem Ziel entwickelt, die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik auch für die private Nutzung zu Hause verfügbar zu machen. Bei dem Test handelt es sich um ein immunochromatographisches Analyseverfahren, das Drogen bzw. deren Abbauprodukte im Urin nachweisen kann. **Die durch eine Leistungsbewertungsstudie gemessene Sensitivität beträgt mehr als 96%.**

### Ist die Testdurchführung kompliziert?

Nein: Alles was Sie brauchen, sind sauber gewaschene Hände, eine Uhr, einen Becher und eine ebene Fläche. Den genauen Testablauf finden Sie auf der Rückseite.

### Leistungsdaten:

Der Drogen Multi-Schnelltest kann parallel die folgenden Substanzklassen nachweisen. Er ist dabei jeweils mit der angegebenen Empfindlichkeit (Cut-off) auf einen Vertreter kalibriert:

Test	Abkürzung	Kalibrator	Cut-off (ng/ml)	Nachweisbarkeit im Urin seit letztem Konsum <sup>1</sup>
Amphetamin	AMP	D-Amphetamin	1.000	1 bis 3 Tage
Benzodiazepin	BZO	Oxazepam	300	Gelegentlicher Konsum: bis 3 Tage Regelmäßiger Konsum: bis 6 Wochen
Kokain	COC	Benzoylcegonin	300	Kokain ist nur einige Stunden nachweisbar, das Abbauprodukt 2 bis 3 Tage
Marihuana	THC	11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH	50	Gelegentlicher Konsum: 2 bis 4 Tage Dauerkonsum: 2 bis 6 Wochen
Methadon	MET	Methadon	300	2 bis 3 Tage
Opiate	OPI	Morphin	300	Bis zu 8 Stunden

Der Drogen Multi-Schnelltest weist zusätzlich zu den Kalibrator-Substanzen auch andere verwandte Derivate oder Metabolite nach.

<sup>1</sup>Bitte beachten Sie, dass es sich um grobe Richtwerte handelt. Für die Nachweisbarkeit von Drogen im Urin spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle.

### Wichtiger Hinweis:

**Positive und unklare Resultate sollten mit einer weiteren analytischen Methode bestätigt werden.**

<sup>2</sup>Falsch-positiv = ein positives Testergebnis wird fälschlicherweise angezeigt, obwohl das Ergebnis tatsächlich negativ ist.

[www.veroval.de](http://www.veroval.de)  
[www.veroval.at](http://www.veroval.at)  
[www.veroval.ch](http://www.veroval.ch)  
[www.veroval.be](http://www.veroval.be)

### Materialien

- 1 Folienverpackung mit Multi-Teststreifenkassette und Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung

### Symbolerklärung


 Gebrauchsanweisung beachten	 Bei +4 °C bis +30 °C trocken lagern.	 Verwendbar bis (siehe Aufdruck Packung)
 Inhalt ausreichend für 1 Prüfung		 Nicht wiederverwenden
 Hersteller		 Chargenbezeichnung (siehe Aufdruck Packung)
 Reaktionszeit im Multi-Teststreifen	 Schnelltest zur Eigenanwendung	

NanoRepro AG  
Untergasse 8  
D-35037 Marburg

Vertrieb:  
DE – PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim  
info@hartmann.info  
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.  
2355 Wiener Neudorf  
office@at.hartmann.info  
CH – IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen  
office@ivf.hartmann.info  
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A.  
1480 Saintes/Sint-Renelde  
info@be.hartmann.info

## Drogen Multi-Schnelltest zur Eigenanwendung Und so wird's gemacht:

1

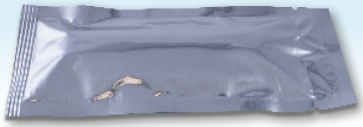

### Vorbereitung:

Bringen Sie die Testkassette im Folienbeutel vor Testbeginn auf Raumtemperatur (15°C–27°C). Nehmen Sie den Drogentest aus der Folienverpackung.

2




- Sammeln Sie frischen Urin in einem Becher. Bei Trübungen im Urin warten Sie bitte, bis sich diese absetzen.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und tauchen Sie den Drogentest für mindestens 10 Sekunden bis zur Markierung in den Urin. Stellen Sie sicher, dass die Testkassette nur bis zum unteren Rand eingetaucht wird.
- Achten Sie darauf, das Auswertungsfenster nicht zu berühren und keinen Urin darauf zu bringen.

3



- Stecken Sie die Kappe wieder auf die Testkassette und legen Sie diese auf eine ebene Fläche. Berühren oder bewegen Sie die Testkassette nicht mehr. Warten Sie auf das Erscheinen der farbigen Linien im Reaktionsfeld.

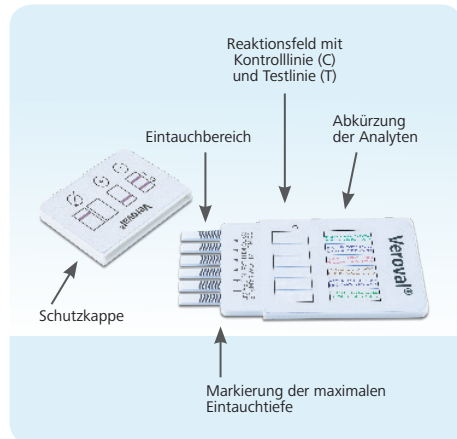


4

- Lesen Sie das Ergebnis nach ca. 5 Minuten ab, aber nicht nach mehr als 10 Minuten.
- Der Drogentest muss bei guten Lichtverhältnissen ausgewertet werden, damit auch schwache Farblinien erkannt werden können.

Zur Auswertung des Ergebnisses bestimmen Sie zunächst, ob im Reaktionsfeld unter (C) jeweils eine Linie zu sehen ist. Es ist unerheblich, wie stark oder schwach die Kontrolllinie ausgeprägt ist. Jeder Teststreifen ist einzeln auszuwerten.


### Negatives Ergebnis

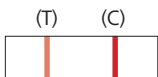

Bei einem negativen Ergebnis, also einer **drogenfreien Urinprobe**, erscheinen in den Reaktionsfeldern **hell- bis dunkelrote Testlinien (T)** und **hell- bis dunkelrote Kontrolllinien (C)**.

Die Konzentration dieser spezifischen Drogen (oder ihrer Derivate) in der Probe liegt unterhalb des Grenzwertes.


### Positives Ergebnis

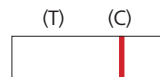

Bei einem **positiven Ergebnis** erscheinen in den Reaktionsfeldern **keine Testlinien (T)** und nur **hell- bis dunkelrote Kontrolllinien (C)**.

Die Konzentration dieser spezifischen Drogen (oder ihrer Derivate) in der Probe liegt oberhalb des Grenzwertes. Rückschlüsse über die Höhe der Konzentration und damit die Schwere des Konsums sind nicht möglich.

### Ungültiges Ergebnis

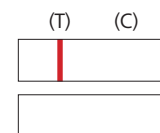

Wenn Sie in den Reaktionsfeldern **nur Testlinien (T)**, **keine Kontrolllinien (C)** oder **gar keine Linien** sehen, ist der **Test ungültig**.

Überprüfen Sie, ob Sie alle Punkte der Gebrauchsanweisung genau befolgt haben. Führen Sie einen neuen Test mit einer neuen Urinprobe durch.

### Hinweise und Einschränkungen:

- Der Multi-Schnelltest ist kein Medizinprodukt und darf daher nicht zu diagnostischen Zwecken herangezogen werden.
- Nur wenn tatsächlich **keine Testlinie (T)** sichtbar ist, ist der Test positiv.
- Vorsätzlich eingesetzte Verfälschungsmittel können den Test beeinträchtigen. Im Falle einer vermuteten Verfälschung sollte der Test mit einer neuen Urinprobe wiederholt werden.
- Der Selbst-Test kann nicht zwischen Missbrauchsdrogen und artverwandten verschreibungspflichtigen Medikamenten unterscheiden.
- Obwohl eine Beeinträchtigung des Tests durch eine Bandbreite an Stoffen ausgeschlossen werden kann, kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Substanzen sowie technische oder verfahrensbedingte Fehler das Testergebnis verfälschen.