

## Drogteszt

Hat különböző kábítószer kimutatására szolgáló többkomponensű gyors teszt

5 perc



Szenzitivitás  
> 96 %



### A kábítószer mellékhatásokkal járó, függőséget okozó anyagok

A kábítószer a fogyasztók viselkedését és hangulatát befolyásoló pszichoaktív anyagok. A kábítószer (vagy egyenlő több kábítószer) fogyasztása jelentős kockázatokkal jár. Hosszú távon káros hatással van a fizikai egészségre, továbbá pszichoszociális problémák kialakulása is várható az esetleges függőség következtében.

### Derítse ki, mi a helyzet: többkomponensű droggyors teszt

A többkomponensű droggyors teszt segítségével egy vizeletmintából gyorsan és pontosan kimutathatók a következő szerekkel való visszaélésre utaló jelek: **amfetaminok, benzodiazepinek (nyugtatók), kokain, marihuána (THC), metadon, valamint opiátok.** A teszt információt nyújt arra vonatkozóan, hogy az illető mely kábítószerből fogyasztott.

### Mennyire megbízható a Veroval® teszt?

A többkomponensű droggyors tesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra is elérhetővé tegyék. A teszt immunkromatográfiai elemzési eljárást alkalmaz, amellyel kimutathatók a drogok, illetve bomlástermékeik. **A teljesítményértékelő vizsgálatokkal mért szenzitivitása több mint 96 %-os.**

### Bonyolult elvégezni a tesztet?

Nem: Önnek mindössze egy órára, egy pohárra, sík felületre és tiszta kezekre van szüksége. A teszt pontos menete a hátoldalon található.

### Teljesítményadatok:

A többkomponensű droggyors tesztel egyidejűleg a következő anyagcsoportokat lehet kimutatni. A teszt az egyes anyagcsoportok kalibrálására közvetítő anyagot használ az érzékenységi szintjének (cut-off) megfelelően.

Teszt	Rövidítés	Kalibrátor	Cut-off (ng/ml)	A vizeletből történő kimutathatóság az utolsó fogyasztást követően <sup>1</sup>
Amfetamin	AMP	D-amfetamin	1000	1–3 nap
Benzodiazepin	BZO	Oxazepam	300	Alkalmi fogyasztás: 3 napig Rendszeres fogyasztás: 6 hétig
Kokain	COC	Benzoilekgonin	300	A kokain csupán néhány órán át kimutatható, a bomlásterméke 2–3 napig.
Marihuána	THC	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	50	Alkalmi fogyasztás: 2–4 napig Folyamatos fogyasztás: 2–6 hétig
Metadon	MET	Metadon	300	2–3 nap
Opiátok	OPI	Morfin	300	Legfeljebb 8 órán át

A többkomponensű droggyors tesztel a kalibrátor anyagokon kívül egyéb szarmazékok, illetve metabolitok is kimutathatók.

<sup>1</sup> Kérjük, vegye figyelembe, hogy durva becslésekről van szó. A kábítószer vizeletben való kimutathatóságában számos egyéni tényező is szerepet játszik.

### Fontos megjegyzés:

**A pozitív és bizonytalan eredményeket egy további analitikai módszerrel kell igazolni.**

<sup>2</sup> **Álpozitív** = tévesen pozitív teszt eredmény jelenik meg, pedig az eredmény valójában negatív.

[www.veroval.hu](http://www.veroval.hu)

### Komponensek

- Többkomponensű tesztsík-kazettát és száritószerzet tartalmazó 1 db fóliacsomagolás
- 1 db használati utasítás

### Szimbólumok magyarázata

Vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat!	+4 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.	Lejárat dátum (lásd a csomagolásra nyomtatva)
A tartalma 1 tesztet tartalmazó csomagolásban elegendő.		Ne használja fel újra!
Gyártó		Tételszám (lásd a csomagolásra nyomtatva)
5 perc		Gyors teszt saját felhasználásra
Reakcióidő többkomponensű tesztsík esetében		

NanoRepro AG  
Untergasse 8  
D-35037 Marburg


Forgalmazó:  
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy, Budapark  
info@hu.hartmann.info

### Drogteszt

### Többkomponensű gyorseszteszt saját felhasználásra

### A teszt menete:

1

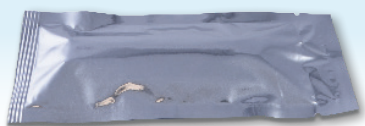

#### Előkészítés:


Mielőtt hozzáfogna a teszt elvégzéséhez, hagyja, hogy a tesztkazetta a fóliatasakban elérje a szobahőmérsékletet (15 °C – 27 °C). Vegye ki a drogtestet a fóliacsomagolásból.

2



- Gyűjtsön friss vizeletet egy pohárba. Ha a vizelet zavaros, várjon, amíg le nem ülepszik.
- Vegye le a védőkupakot, és merítse a vizeletbe a drogtestesztesztet a jelölés magasságáig, legalább 10 másodpercre. Ügyeljen rá, hogy a tesztkazetta csak az alsó széléig merüljön a vizeletbe.
- Gondoskodjon róla, hogy ne érjen az értékelőablakhoz, és hogy ne kerüljön rá vizelet.


3

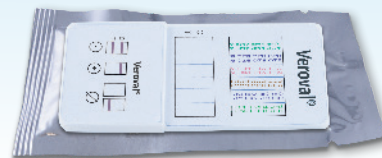

- Tegye vissza a kupakot a tesztkazettára, majd helyezze sík felületre. Ezt követően már ne érintse meg és ne mozgassa el a tesztkazettát. Várjon, amíg a színes vonalak meg nem jelennek a reakciómezőben.


4

- Az eredményt kb. 5 perc, de legfeljebb 10 perc után olvassa le.
- A drogtestet jó fényviszonyok mellett kell kiértékelni, hogy a halványan színeződött vonalakat is fel lehessen ismerni.

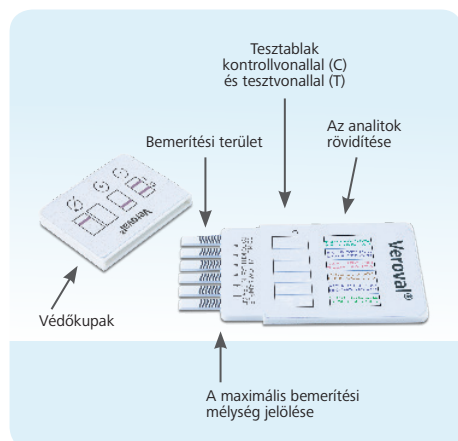

**Az eredmény kiértékeléséhez először állapítsa meg, hogy a reakciómezőben a (C) alatt látható-e egy vonal. Lényegtelen, hogy a kontrollvonal mennyire hangsúlyos. Az egyes tesztcsíkokat egyenként kell kiértékelni.**

#### Negatív eredmény

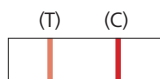

Negatív eredmény, tehát **drogmentes vizeletminta** esetén a reakciómezőkben **világospiros-sötétpiros tesztvonalak (T)** és **világospiros-sötétpiros kontrollvonalak (C)** jelennek meg.

A szóban forgó drogok (vagy származékaik) koncentrációja a mintában a határérték alatt van.


#### Pozitív eredmény



Pozitív eredmény esetén a reakciómezőkben **nincsenek tesztvonalak (T)**, és csak **világospiros-sötétpiros kontrollvonalak (C)** jelennek meg.

A szóban forgó drogok (vagy származékaik) koncentrációja a mintában a határérték fölött van. A koncentráció nagyságára és ezáltal a fogyasztás mértékére nem lehet következtetni.

#### Érvénytelen eredmény

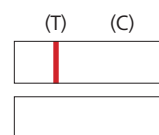

Ha a reakciómezőkben **csak tesztvonalak (T) láthatók, és kontrollvonalak (C) nem**, vagy **semmilyen vonal nem** látható, akkor a **teszt érvénytelen**.

Ellenőrizze, hogy pontosan betartotta-e a használati utasítás minden pontját. Végezzen új tesztet egy új vizeletmintával.

#### Megjegyzések és korlátozások:

- A többkomponensű gyorseszteszt nem minősül orvostechnikai eszköznek, ezért diagnosztikai célokra nem alkalmazható.
- A teszt csak akkor pozitív, ha ténylegesen **nincs látható tesztvonal (T)**.
- A szándékosan használt szennyezőanyagok meghamisíthatják a teszt eredményét. Feltételezhető meghamisítás esetén a tesztet meg kell ismételn egy új vizeletmintával.
- Az otthoni gyorseszteszt nem tud különbséget tenni a kábítószerek és az ezekkel rokon vényköteles gyógyszerek között.
- Bár az kizárható, hogy a tesztet az anyagok egy bizonyos köre befolyásolta-e, az nem zárható ki, hogy más anyagok, illetve technikai vagy eljárási hibák nem befolyásolják-e a teszt eredményét.