

Drogas

Multiteste rápido para deteção de 6 drogas diferentes

5 min



Sensibilidade >96%



Drogas – Substâncias aditivas com efeitos secundários

As drogas são substâncias psicoativas que influenciam o comportamento e o humor dos respetivos consumidores. O consumo de uma ou mais drogas acarreta, indubitavelmente, perigos substanciais. A longo prazo estão previstos danos para a saúde física, assim como problemáticas psicossociais como consequência de um hipotético vício.

Tomar conhecimento da situação: teste rápido de drogas

Com o teste rápido de drogas podem ser detetados indícios, de forma célere e segura, do abuso de **anfetaminas, benzodiazepinas (sedativos), cocaína, marijuana (THC), metadona, assim como opiáceos** com base numa amostra de urina. O teste informa que drogas foram consumidas.

Qual a fiabilidade do teste Veroyal®?

O multiteste rápido de drogas foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar a precisão e a segurança do diagnóstico moderno também para uso doméstico. No caso do teste trata-se de um método de análise imunocromatográfico, que pode detetar drogas ou os seus produtos de degradação na urina.

A sensibilidade medida através de um estudo de avaliação do desempenho é superior a 96%.

A realização do teste é complicada?

Não: Necessita apenas de mãos limpas, um relógio, um copo e uma superfície plana. O procedimento exato para a realização do teste é descrito no verso.

O que devo ter em atenção?

Advertências e indicações importantes:

- O teste destina-se unicamente a uso externo.
- Não ingerir nenhum dos componentes.
- Manter o teste fora do alcance das crianças.
- Não expor o teste à luz solar direta ou ao frio extremo. Não congelar. Conservar em local seco entre 4°C e 30°C.
- Valores extremos de humidade e temperatura, podem afetar os resultados do teste.
- Utilizar o produto somente até ao prazo de validade.
- Caso as instruções não sejam seguidas corretamente, existe o risco de ocorrência de resultados falsos.
- Não utilizar o teste caso a embalagem se encontre danificada. Não utilizar componentes do teste danificados.
- Podem ocorrer resultados falsos positivos² em casos raros (p. ex. no caso de ingestão de determinados alimentos/suplementos alimentares).
- Todos os componentes do teste destinam-se apenas a utilização neste teste. Não reutilizar o teste!
- Após a abertura do invólucro de alumínio, o teste deve ser protegido de impurezas e deve ser efetuado imediatamente no prazo de uma hora.
- A interpretação correta do teste pode ser comprometida por má visão, daltonismo ou iluminação insuficiente.
- As amostras de urina podem ser infecciosas. Os testes usados devem, por isso, ser descartados no lixo doméstico e as mãos devem ser a seguir minuciosamente lavadas.

Dados de desempenho:

O multiteste rápido de drogas pode detetar em paralelo as seguintes classes de substâncias. É utilizado um agente para calibrar cada substância com a sensibilidade (valor de corte) descrita:

Teste	Abreviatura	Calibrador	Valor de corte (ng/ml)	Rastreabilidade na urina desde o último consumo ¹
Anfetamina	AMP	D-anfetamina	1000	1 a 3 dias
Benzodiazepina	BZO	Oxazepam	300	Consumo ocasional: até 3 dias Consumo regular: até 6 semanas
Cocaína	COC	Benzoilecgonina	300	A cocaína é detetável somente durante algumas horas, o produto de degradação 2 a 3 dias
Marijuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	50	Consumo ocasional: 2 a 4 dias Consumo contínuo: 2 a 6 semanas
Metadona	MET	Metadona	300	2 a 3 dias
Opiáceo	OPI	Morfina	300	Até 8 horas

O multiteste rápido de drogas deteta, além das substâncias calibradas, também outros derivados e metabolitos usados.

¹ Tenha em atenção que se tratam de valores de referência brutos. Muitos fatores individuais afetam a rastreabilidade de drogas na urina.

Nota importante:

Os resultados positivos e incertos devem ser confirmados com um outro método analítico.


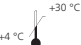

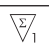


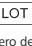


² **Falso positivo** = um resultado positivo é apresentado erroneamente, apesar de o resultado ser na realidade negativo.

www.veroyal.pt

Materiais

- 1 cartucho de tiras multiteste e desidratante em invólucro de alumínio
- 1 folheto informativo

Explicação dos símbolos

 Consulte o folheto informativo	 +4 °C a +30 °C Conservar em lugar seco entre +4 °C a +30 °C.	 Data de validade (ver embalagem)
 Conteúdo suficiente para 1 teste		 Não reutilizar
 Fabricante		 Número de lote (ver embalagem)
 Tempo de resposta nas tiras de multiteste		 Teste rápido para autodiagnóstico

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg

Distribuidor:
PT – PAUL HARTMANN LDA
2685-378 Prior Velho
info@pt.hartmann.info