

Veroval[®]



Veroval®



Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in formato pdf.

Veroval®



In questo breve video vi spieghiamo come utilizzare le funzioni di PDF e stampa su Veroval® medi.connect.

Veroval®

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

ultima misurazione ultima settimana Ultimo Mese

Pressione arteriosa

Sistolica - Diastolica - Polso -

Peso

- Kg - BMI -

Temperatura

mattina - a mezzogiorno - sera -

Self-test

Test	Data	Risultato	prossimo test
Colesterolo	-	-	-
Intestino	-	-	-
Stomaco	-	-	-


ECG

OK SLOW FAST ERROR

PAUSE RHYTHM WAVE

Visualizzare valutazione dettagliata

Per prima cosa occorre aprire Veroval® medi.connect sul PC.

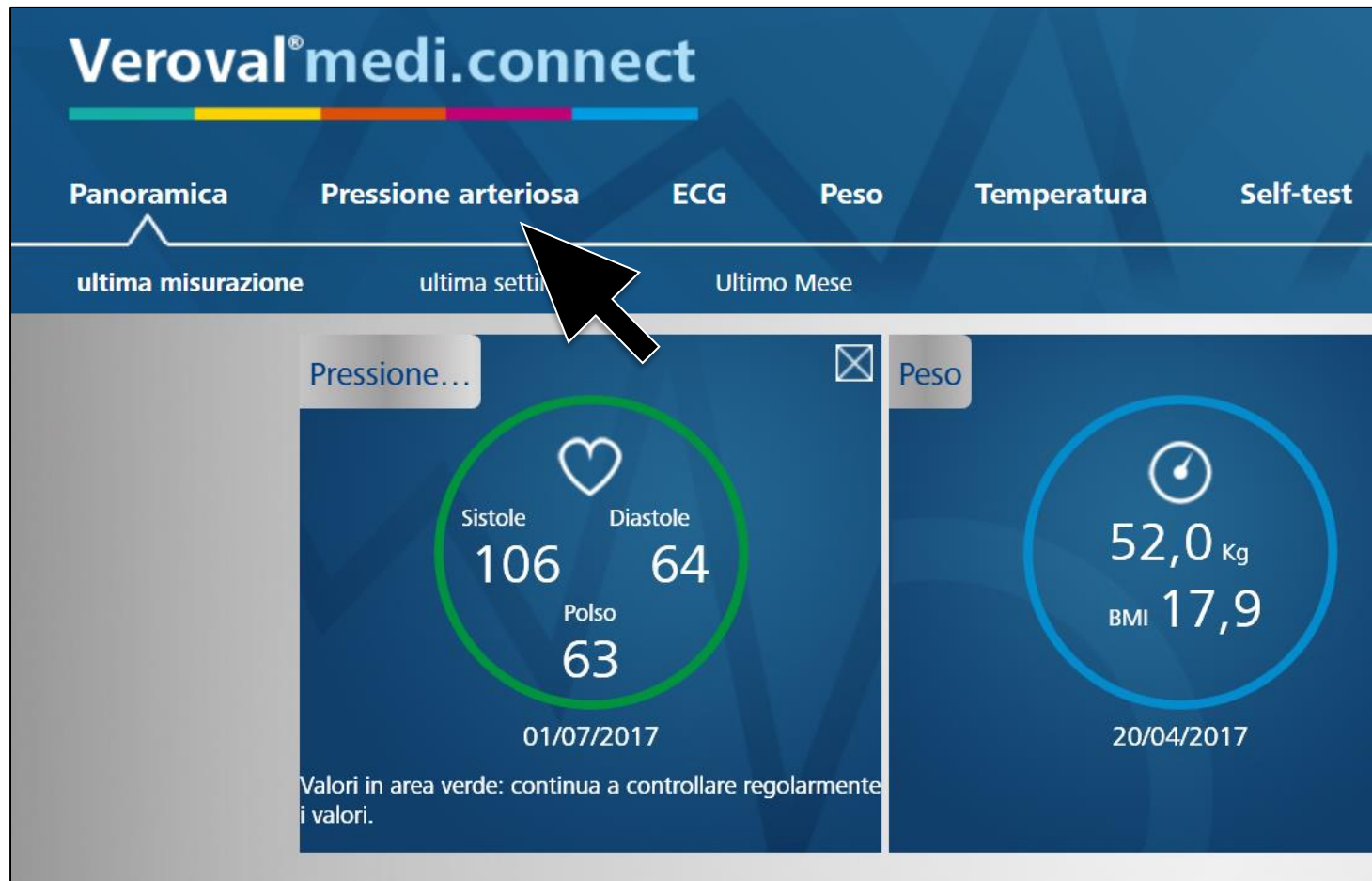

Per stampare i valori della pressione arteriosa fare clic su «pressione arteriosa» sulla parte superiore del pannello di controllo.

Veroval® medi.connect

Mario Rossi
M1 M2

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

Pressione arteriosa

vista

Settimana Mese **selezionare** 22/07/2017 15 - 23/07/2017 15 Ricerca MAD

mattina sera giornata intera

Linee guida OMS

Sistole (in mmHg)	Diastole (in mmHg)	
> = 180	> = 110	consultare un medico
160 - 179	100 - 109	
140 - 159	90 - 99	Controlli medici regolari
130 - 139	85 - 89	
120 - 129	80 - 84	Controllo autonomo
< 120	< 80	

Media

Sistole Diastole

Per selezionare le date che si desidera stampare....

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the logo 'Veroval® medi.connect' is shown with a colorful bar below it. A navigation menu includes 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', and 'Self-test'. The 'Pressione arteriosa' section is active, showing a 'vista' button and icons for a line graph, a circular refresh icon, a list view, and a PDF icon. Below this, there are date selection fields: 'Settimana', 'Mese', and 'selezionare' followed by two date pickers showing '22/07/2017' and '23/07/2017'. A 'Ricerca' button and a 'MAD' checkbox are also present. At the bottom of the date pickers, there are radio buttons for 'mattina', 'sera', and a checked 'giornata intera' option. A black mouse cursor is pointing at the calendar icon of the first date picker.

...fare clic sull'icona del calendario.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1 M2). The main navigation bar includes: Panoramica, Pressione arteriosa (selected), ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The 'Pressione arteriosa' section is active, showing a 'vista' menu with icons for line graph, clock, list, and PDF. Below this, there are date selection fields: 'Settimana' and 'Mese selezionare' with a calendar icon, followed by '22/07/2017' and '23/07/2017' with calendar icons, a 'Ricerca' button, and a 'MAD' checkbox. A calendar for 'luglio 2017' is open, showing days of the week (lu, ma, me, gi, ve, sa, do) and dates. The date '22' is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it. Other dates visible include 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Selezionare il periodo dal...


The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1 M2). The main navigation bar includes: Panoramica, Pressione arteriosa (selected), ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The 'Pressione arteriosa' section is active, showing a 'vista' menu with icons for line graph, pie chart, list, and PDF. Below this, there are date selection fields: 'Settimana' and 'Mese selezionare' with a calendar icon, and a date range from 22/07/2017 to 23/07/2017. There are also checkboxes for 'mattina', 'sera', and 'giornata intera', and a 'Ricerca' button. A calendar for July 2017 is overlaid, with the date 23 highlighted. A mouse cursor is pointing at the 23rd. The calendar table is as follows:

luglio 2017						
lu	ma	me	gi	ve	sa	do
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	<	<	<	<	<	<


...al...

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible, followed by a navigation bar with tabs for 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', and 'Self-test'. The 'Pressione arteriosa' tab is active. Below the navigation bar, the main content area features a header for 'Pressione arteriosa' and a 'vista' section with icons for a line graph, a circular refresh icon, a list view, and a PDF icon. The search filters include 'Settimana', 'Mese', and 'selezionare' with date pickers for '22/07/2017' and '23/07/2017'. There are also checkboxes for 'mattina', 'sera', 'giornata intera' (checked), and 'MAD'. A prominent black mouse cursor is pointing at the 'Ricerca' button.

...e cliccare su «Ricerca».

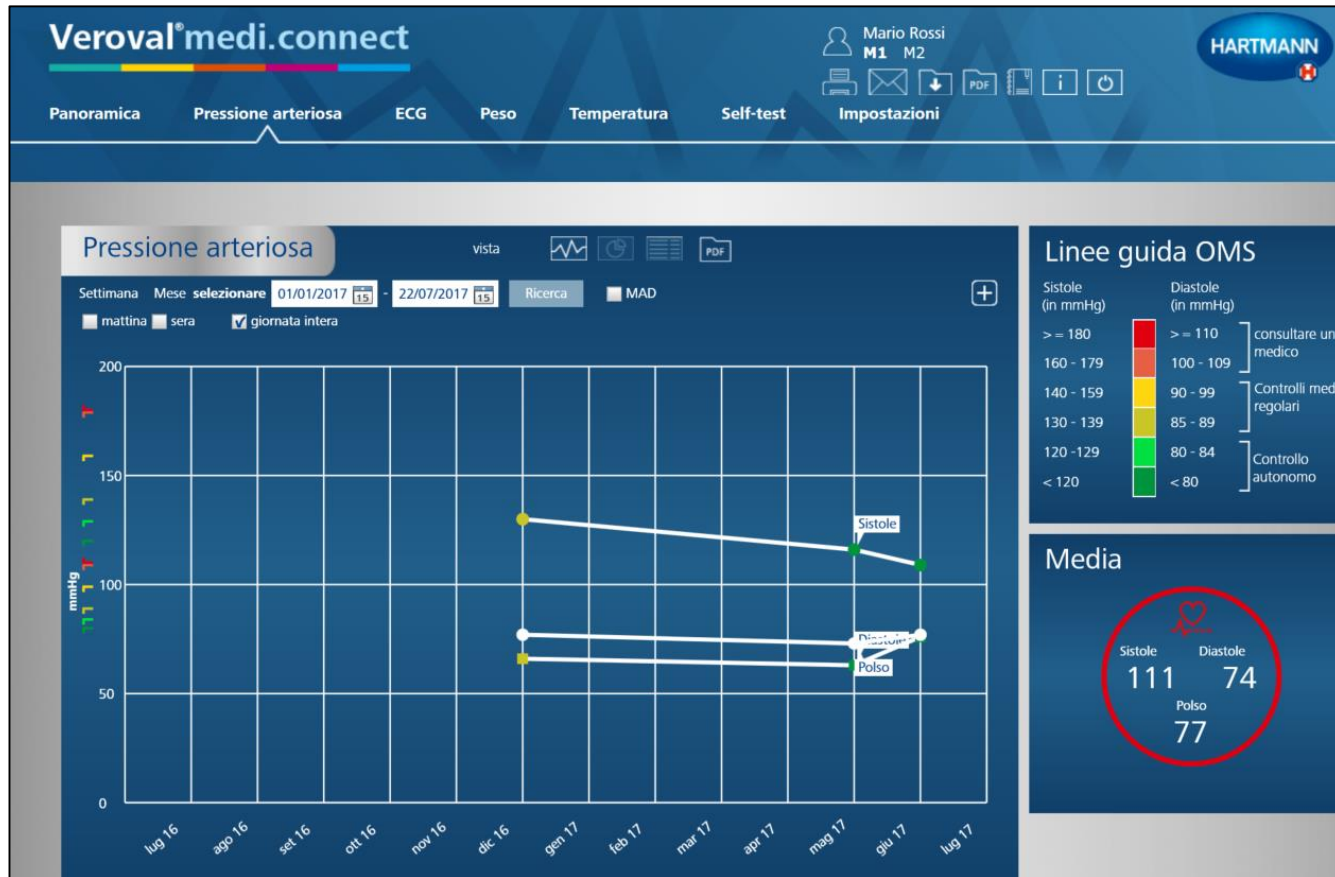

Appare così il grafico con i dati del periodo selezionato.

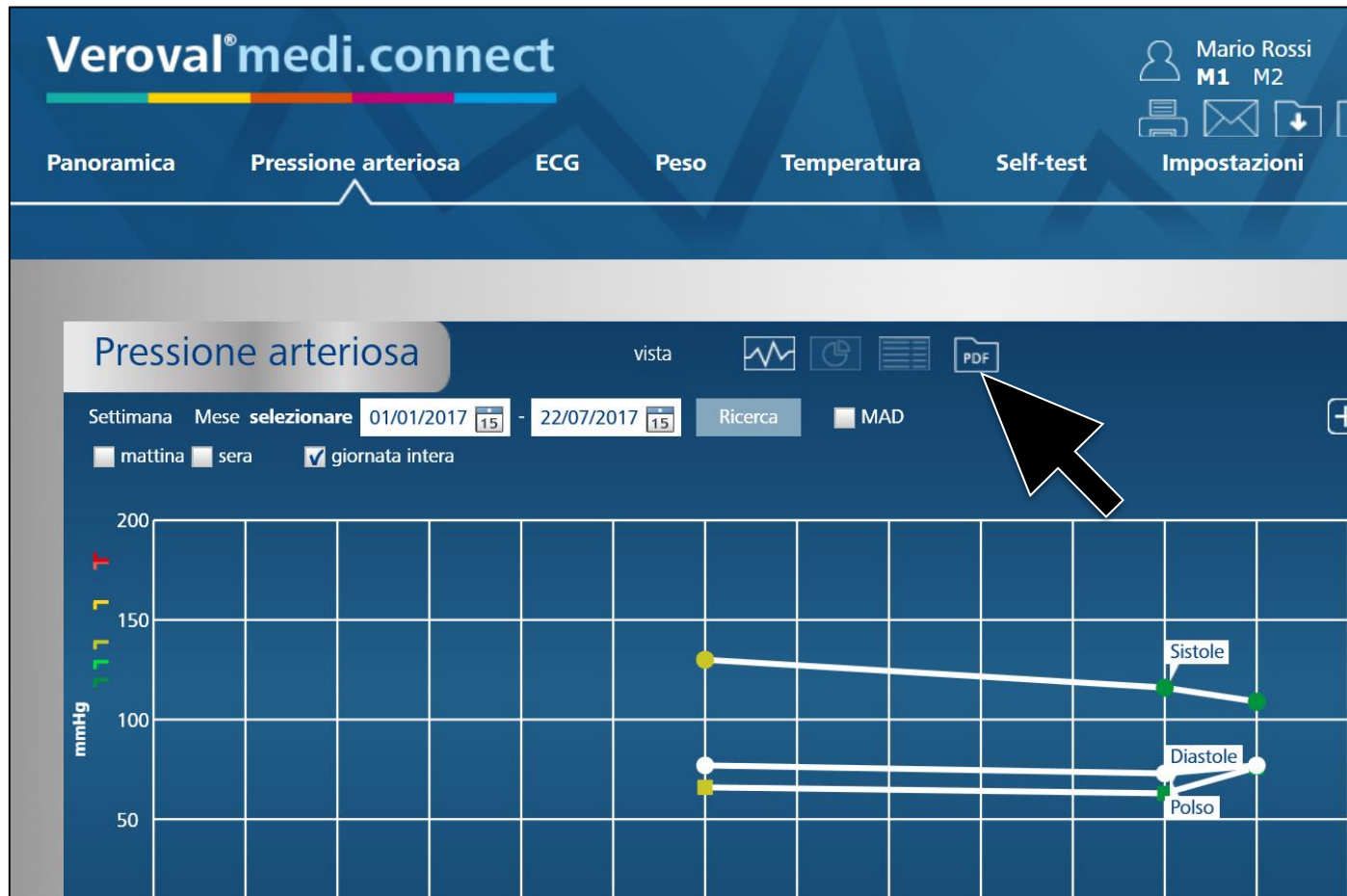

Per utilizzare la funzione di stampa cliccare su «PDF».

PDF

Stampa PDF Nuova selezione Chiudi

Panoramica delle misurazioni della pressione arteriosa: 01/01/2017 - 22/07/2017

Sesso **donna** Via
Nome **Valentina** CAP
Cognome **Tintori** Città
Data di nascita **27/09/1983** Et  (anni) **33** Altezza **176**
Servizio online:


Farmaco
Non sono presenti dati.

Pressione arteriosa


Numero complessivo delle misurazioni per l'intervallo di tempo selezionato: 14

Data	Orario	OMS	Sis. mmHg	Dia. mmHg	Polso/min	Disturbo del ritmo cardiaco	MAD	manuale	avviare analisi	Orario diurno	Farmaco/commento
08/01/2017	23:33	●	130	66	77		87		✓		
30/06/2017	21:56	●	116	63	73		81		✓		
01/07/2017	09:14	●	134	89	85		104		✓		
01/07/2017	09:16	●	136	87	85		103		✓		
01/07/2017	09:19	●	131	95	90		107		✓		
01/07/2017	09:22	●	84	63	72		70		✓		

Si apre cos  il PDF con l'elenco dei dati...

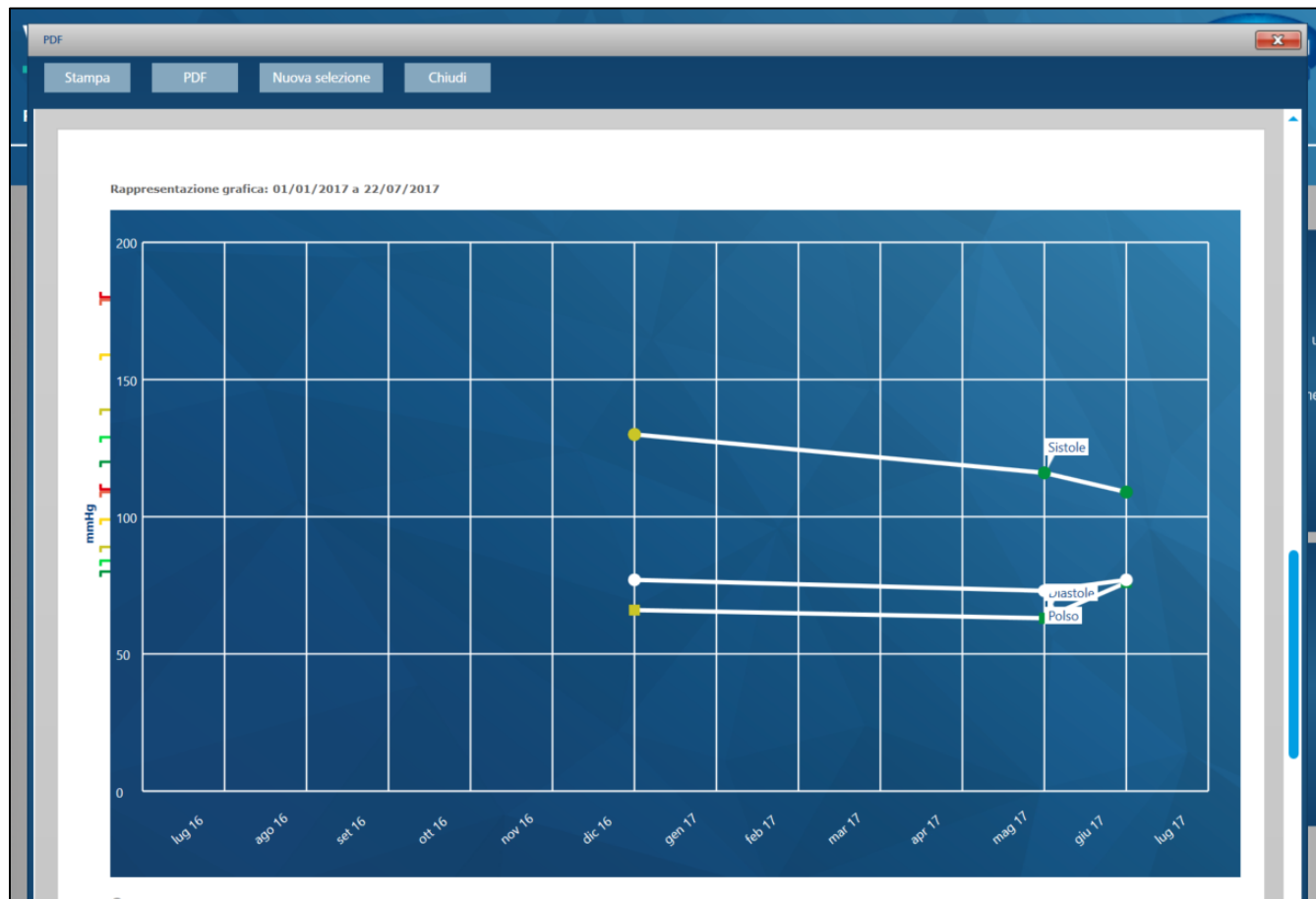


...e le rappresentazioni grafiche dei valori selezionati.

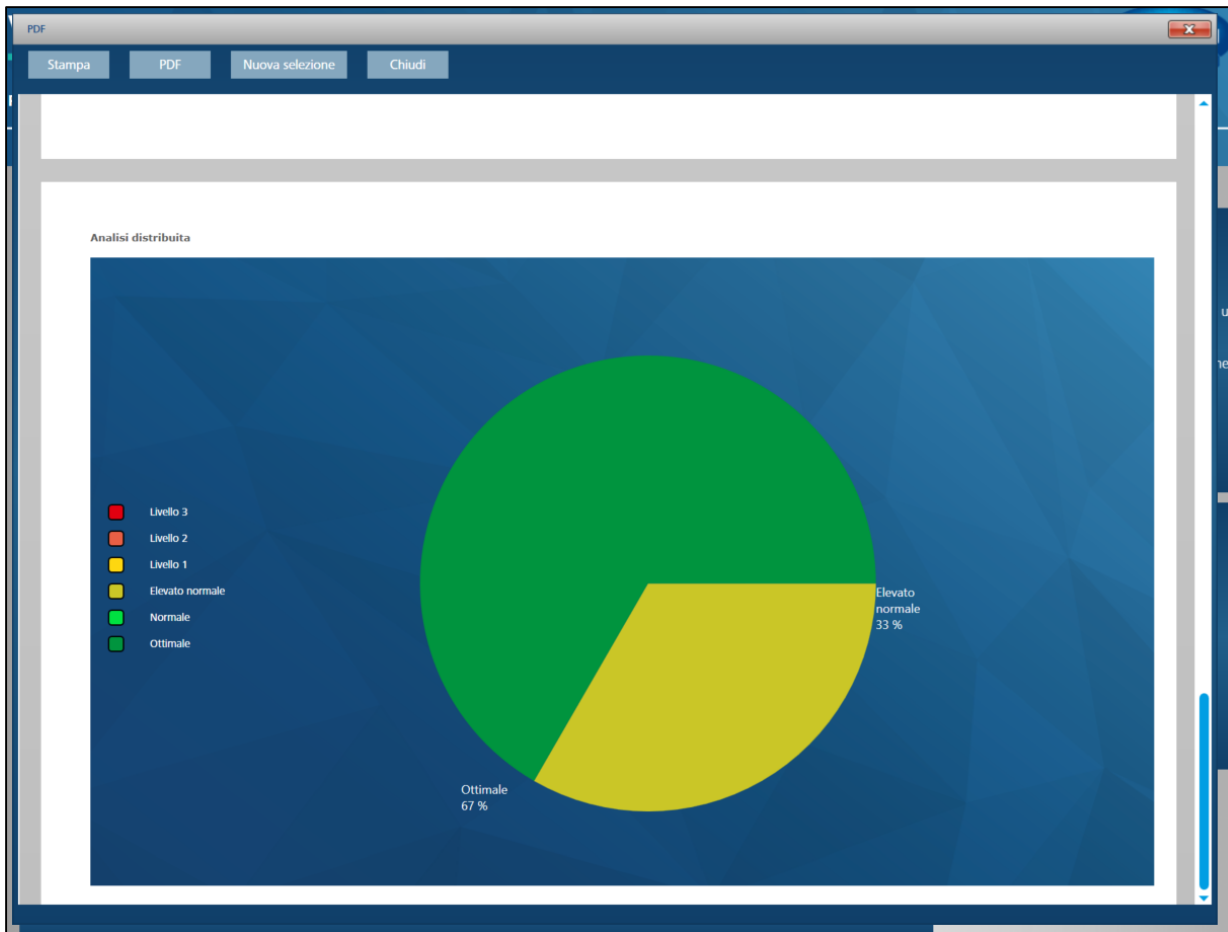


...e le rappresentazioni grafiche dei valori selezionati.

Veroval®

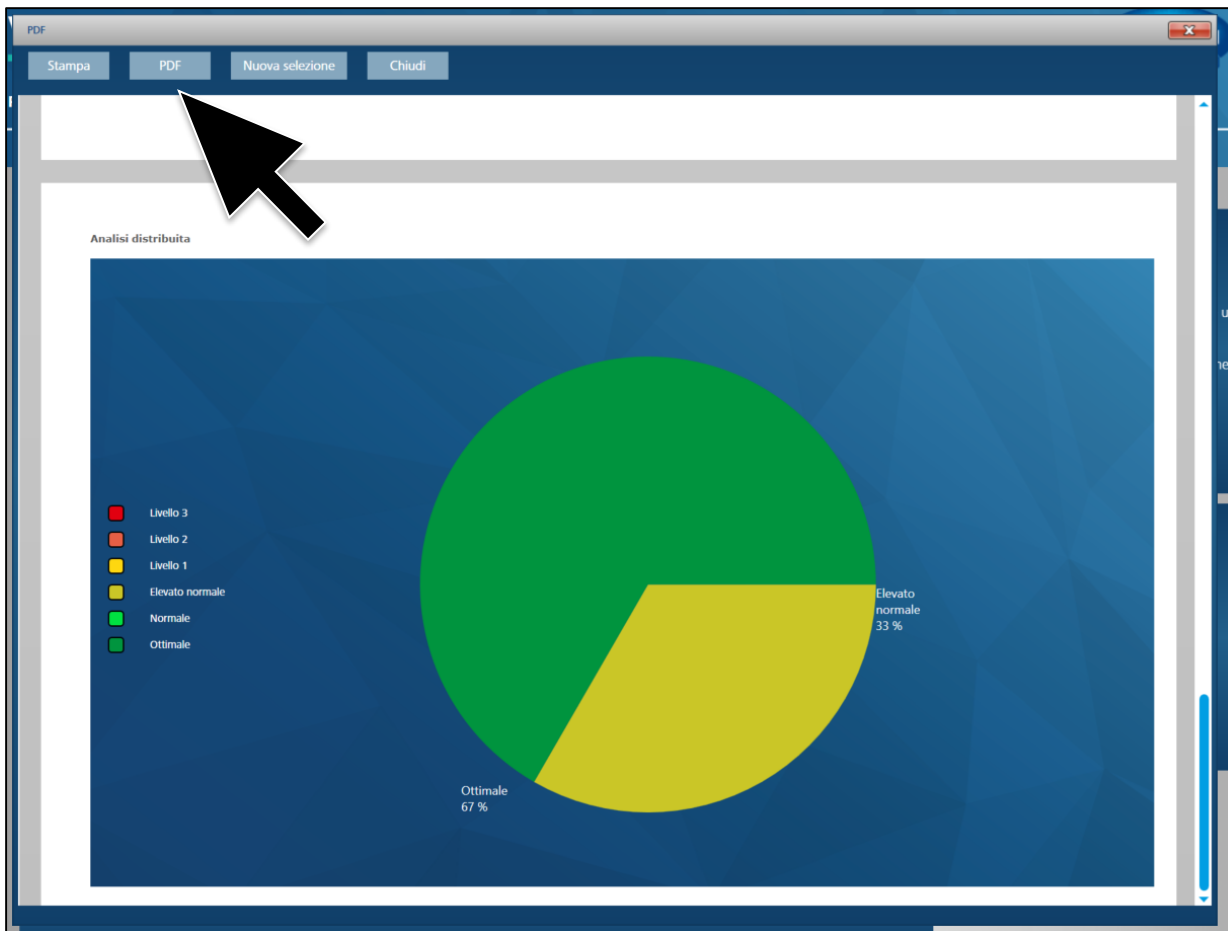


Per salvare il PDF fare clic sulla scritta «PDF» all'interno della finestra aperta...

Veroval®

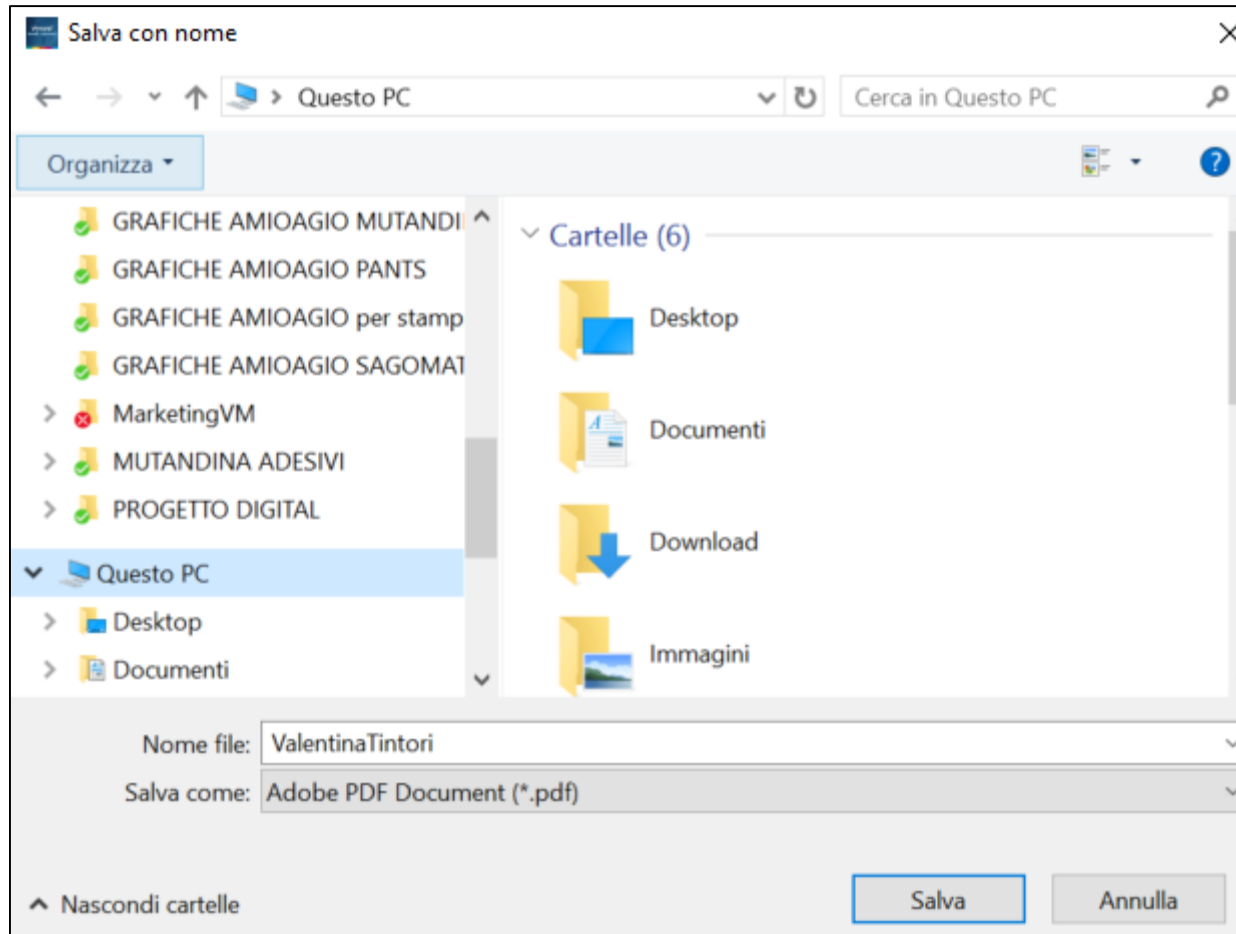


...scegliere dove salvare il documento e fare clic su «salva».

Veroval®

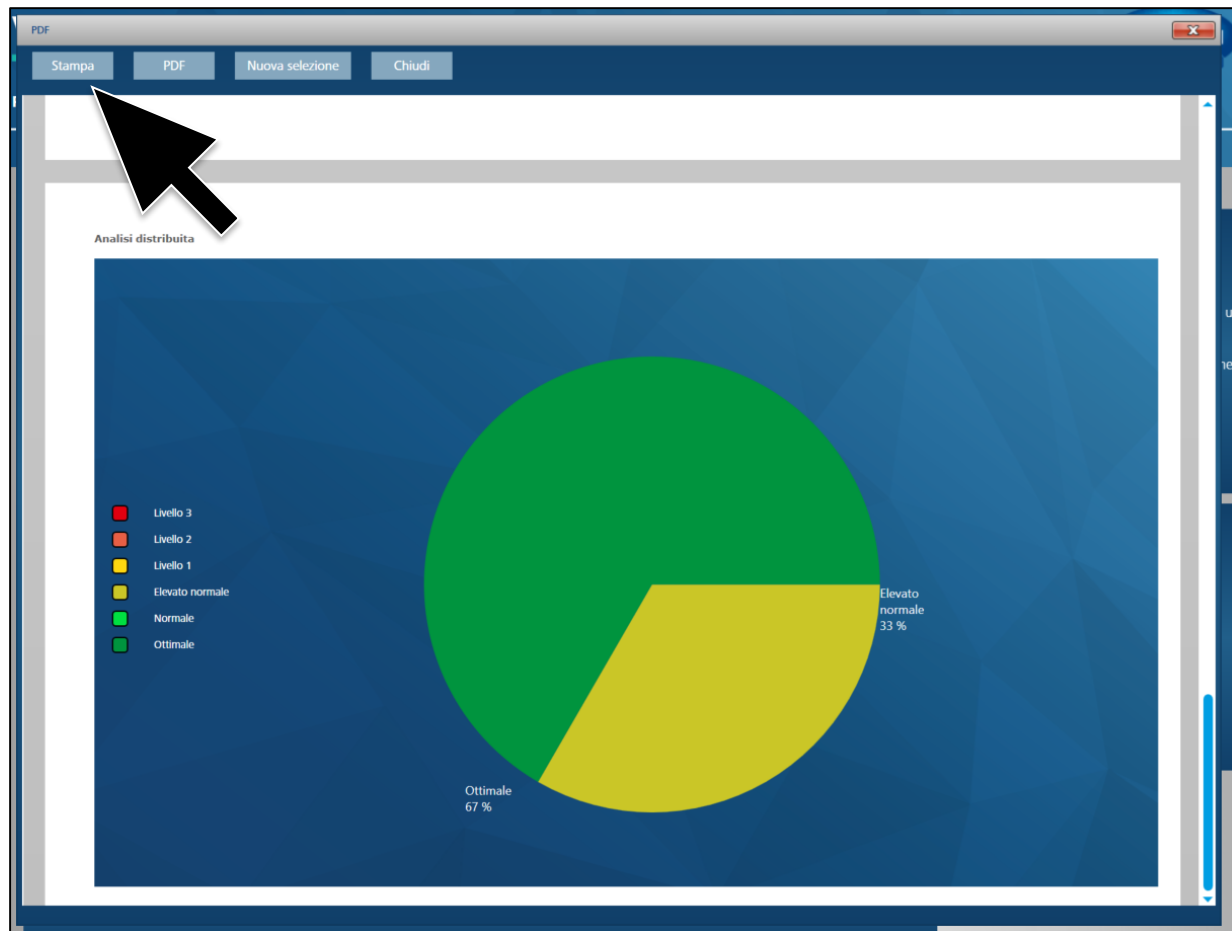

Se invece si desidera semplicemente stampare il documento fare clic su «Stampa» nella finestra aperta.

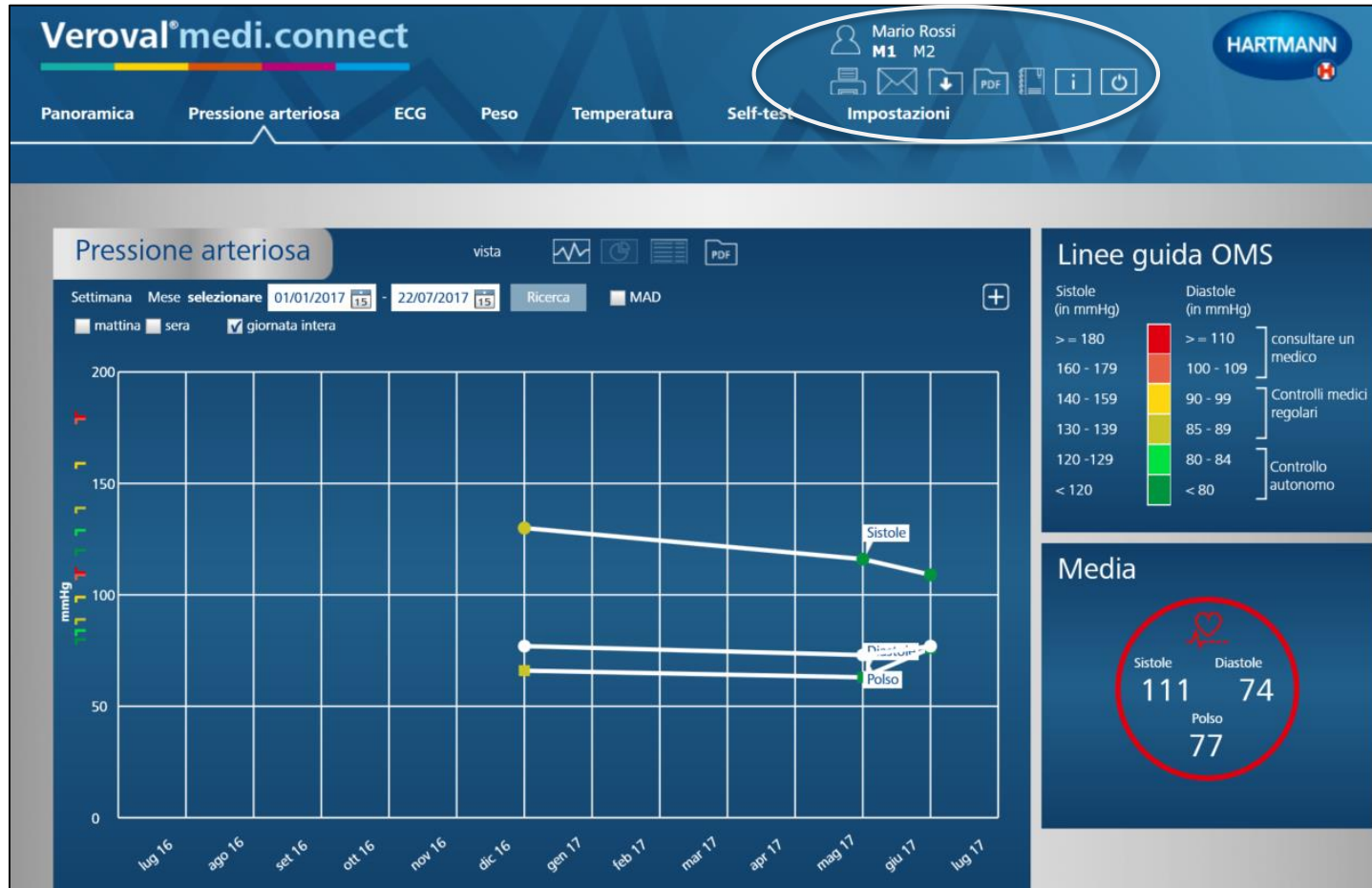

È possibile stampare anche utilizzando la barra generale delle funzioni in alto a destra.

Veroval®



Per far questo basta semplicemente cliccare sull'icona «PDF» o sull'icona «Stampa».

Veroval® medi.connect

Mario Rossi
M1 M2

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

Creare PDF

Intervallo di date dal 01/01/2017 a 22/07/2017

Selezionare la classe di Dettagli utente

- Farmaco
- Pressione arteriosa
- ECG
- Bilancia
- Temperatura
- Self-test


Linee guida OMS

Sistole (in mmHg)	Diastole (in mmHg)	Consigli
> = 180	> = 110	consultare un medico
160 - 179	100 - 109	Controlli medici regolari
140 - 159	90 - 99	
130 - 139	85 - 89	Controllo autonomo
120 - 129	80 - 84	
< 120	< 80	

Media

Sistole: 111 Diastole: 74
Polso: 77

Si apre così una finestra. Selezionare ora i valori da stampare...

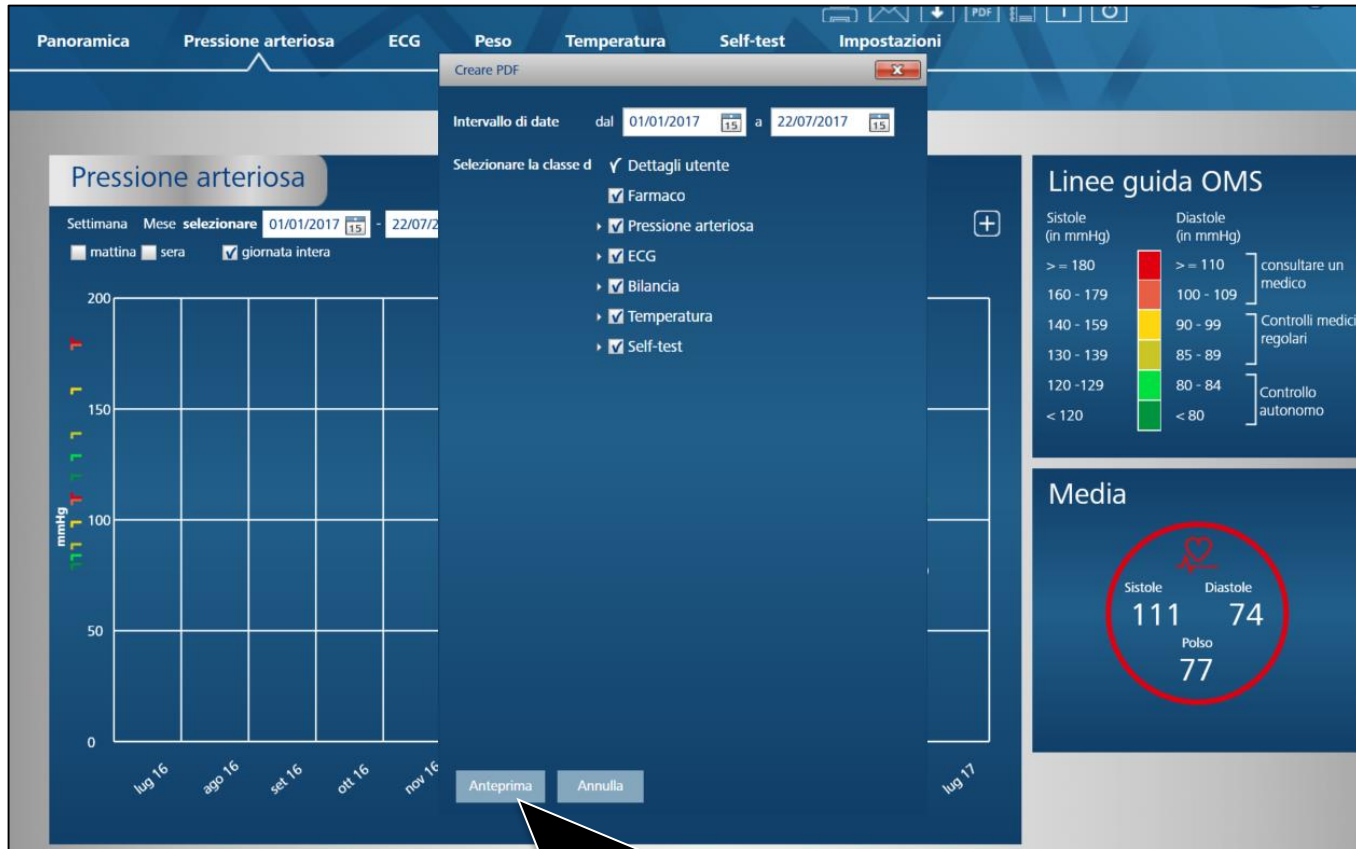

...fare clic su «Anteprima» e seguire i passaggi conosciuti.

Veroval®

