



Aanlegtechniek MoliCare® Premium Elastic




1. Vouw de zijanten open. Vouw het product in de lengte, zodat een soort gootje ontstaat en de antilekrandjes rechtop gaan staan.

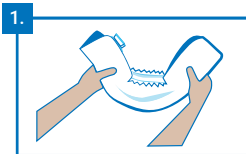


Bij een staande patiënt

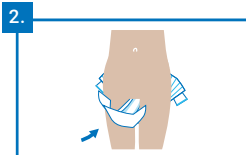

2. Ga naast de patiënt/cliënt staan. Plaats het product **van voren naar achteren**. Centreer het door de vochtindicator uit te lijnen met de wervelkolom.

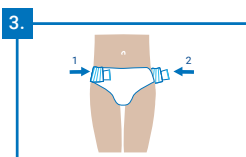


3. Leg de eerste zijkant om de heup van de patiënt/cliënt. Zet de plakstrip vast.

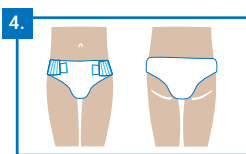


4. Leg de tweede zijkant om de heup van de patiënt/cliënt. Zet de plakstrip vast.




Bij een liggende patiënt

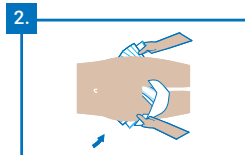

2. **Draai de patiënt op de zijde.** Plaats het product **van voren naar achteren**. Centreer het door de vochtindicator uit te lijnen met de wervelkolom.

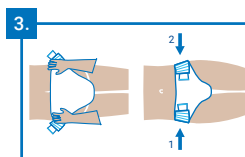


3. Leg de eerste zijkant om de heup van de patiënt/cliënt. Zet de plakstrip vast.

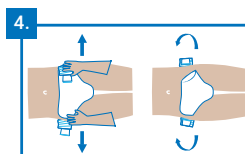

4. Leg de tweede zijkant om de heup van de patiënt/cliënt. Zet de plakstrip vast.

Hoe kiest u de juiste maat?

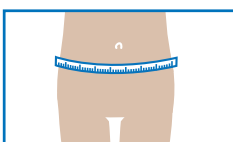

Meet met een meetlint de omvang van de heup van de patiënt/cliënt om de juiste maat te bepalen.

Heupomvang

70 - 90 cm
85 - 120 cm
115 - 145 cm
140 - 175 cm

Maat

S
M
L
XL