

NOUVEAU

Le tensiomètre qui mesure précisément même en cas d'arythmies



# Veroval<sup>®</sup> DUO CONTROL


Recommandé pour les patients qui doivent mesurer leur pression artérielle régulièrement et souffrent d'arythmies cardiaques:



- ✓ Effectue des mesures correctes, même en cas d'arythmies cardiaques
- ✓ Mesures entièrement automatiques effectuées dans le bras
- ✓ 2 méthodes de mesure : mesure des bruits de Korotkoff par le microphone et mesure oscillométrique
- ✓ Facilite la prise correcte de mesure grâce au brassard breveté garantissant un ajustement parfait, à la vérification du positionnement adéquat du brassard et à l'indicateur de repos
- ✓ Simplicité de gestion et de stockage des données grâce au logiciel Veroval<sup>®</sup> medi.connect

## Quel est le principal avantage de l'appareil Veroval<sup>®</sup> Duo Control ?

La plupart des tensiomètres automatiques n'utilisent que la technologie oscillométrique pour mesurer la pression artérielle, qui évalue les ondes de pouls artériel. Le tensiomètre de bras Veroval<sup>®</sup> Duo Control utilise en plus la méthode très précise de Korotkoff (utilisation du microphone pour enregistrer les bruits du cœur), également employée par les médecins. Grâce à la technologie DUO SENSOR, l'appareil Veroval<sup>®</sup> Duo Control effectue des mesures correctes, même en cas d'arythmies cardiaques.

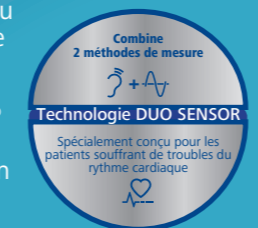

Afin de simplifier le stockage et la gestion des données, l'utilisateur peut transférer les valeurs mesurées au logiciel Veroval<sup>®</sup> medi.connect.

## Quels sont les autres avantages de l'appareil Veroval<sup>®</sup> Duo Control ?

La mesure de la pression artérielle conduit souvent à des résultats erronés en raison d'une mauvaise application. Afin d'éviter ces erreurs de mesure, le tensiomètre Veroval<sup>®</sup> Duo Control est doté des fonctions suivantes :

- un brassard breveté qui vous aide à le positionner correctement sur le haut du bras;
- une vérification du positionnement du brassard, un indicateur de repos et un contrôle de la température ambiante qui vous indiquent directement si la mesure était correcte;
- pour améliorer la lisibilité des valeurs, il dispose d'un rétroéclairage et d'un système d'évaluation tricolore pour interpréter les valeurs.



## Quelques règles d'or pour bien mesurer sa tension artérielle

1. Prendre toujours sa tension à la même heure car notre tension artérielle varie tout au long de la journée.
2. Ne pas fumer ou boire de café dans l'heure précédant la mesure.
3. Prendre sa tension après deux ou trois minutes de repos en position assise ou détendue.
4. Ne pas prendre sa tension en ayant une forte envie d'uriner.
5. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'effectuer une mesure.
6. Ne pas bouger et ne pas parler pendant la mesure.
7. Attendre au moins une minute entre deux mesures consécutives.
8. Prendre régulièrement sa tension.

N.V. PAUL HARTMANN S.A.  
1480 Saintes  
BELGIQUE  
www.veroval.be





NIEUW

De bloeddrukmeter die nauwkeurig meet, zelfs bij aritmie



# Veroyal<sup>®</sup> DUO CONTROL

Aanbevolen voor patiënten die hun bloeddruk regelmatig moeten meten en lijden aan hartritmestoornissen (aritmie):



- ✓ Meet correct, zelfs bij hartritmestoornissen (aritmie)
- ✓ Volautomatische meting aan de bovenarm
- ✓ 2 meetmethoden: Korotkoff microfoon-meting en oscillometrische meetmethode
- ✓ Maakt correct meten eenvoudiger dankzij gepatenteerde Secure Fit manchet, manchetplaatsingscontrole en rustindicator
- ✓ Eenvoudig beheren en opslaan van de gegevens met de Veroyal<sup>®</sup> medi.connect software

## Wat is het belangrijkste voordeel van Veroyal<sup>®</sup> Duo Control ?

De meeste automatische bloeddrukmeters maken alleen gebruik van de oscillometrische technologie, die de arteriële polsgolven meet. De Veroyal<sup>®</sup> Duo Control bovenarmbloeddrukmeter gebruikt bovendien de zeer nauwkeurige Korotkoff-methode (meting met microfoon voor opname van de hartgeluiden) die ook door artsen wordt toegepast. Dank zij deze DUO SENSOR technologie meet de Veroyal<sup>®</sup> Duo Control correct, zelfs bij hartritmestoornissen (aritmie).



Eenvoudig beheren en opslaan van de gemeten waarden met de Veroyal<sup>®</sup> medi.connect software.

## Wat zijn de andere voordelen van Veroyal<sup>®</sup> Duo Control ?

Bij het meten van de bloeddruk zijn de waarden vaak onjuist als gevolg van een verkeerde toepassing. Om foutieve metingen te voorkomen biedt Veroyal<sup>®</sup> Duo Control volgende functies:

- een gepatenteerde manchet helpt u de manchet correct op uw bovenarm te plaatsen;
- de manchetplaatsingscontrole, de rustindicator en de controle van de omgevingstemperatuur geven u onmiddellijk informatie over een al dan niet correct uitgevoerde meting;
- voor beter afleesbare meetwaarden is het apparaat uitgerust met achtergrondverlichting en een verkeerslichtsysteem om de waarden te analyseren.



## Enkele gouden regels voor een juiste bloeddrukmeting

1. Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip want deze varieert in de loop van de dag.
2. Rook of drink geen koffie een uur voor de meting.
3. Ga zitten, neem twee of drie minuten rust en meet in een ontspannen houding.
4. Meet uw bloeddruk niet met een volle blaas.
5. Lees voor het meten aandachtig de gebruiksaanwijzing.
6. Beweeg of praat niet tijdens de meting.
7. Wacht minstens een minuut tussen twee bloeddrukmetingen.
8. Meet regelmatig uw bloeddruk.

N.V. PAUL HARTMANN S.A.  
1480 Sint-Renelde  
BELGIË  
www.veroyal.be



850330 (08/2018)