


MoliNea normal

Hygienunderlägg

MoliNea normal hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.

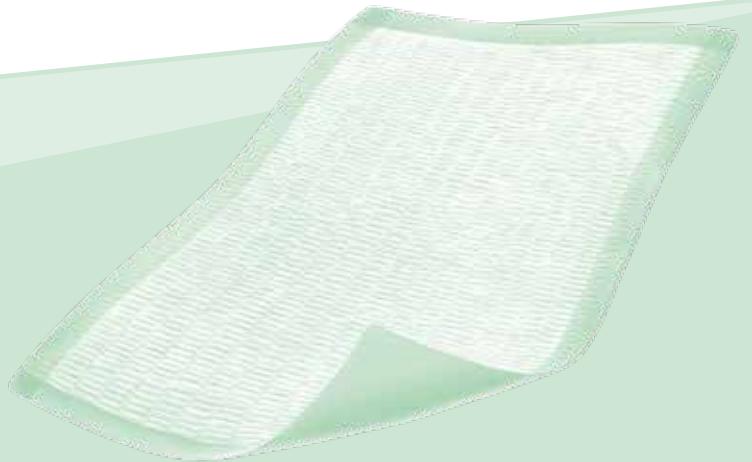

- 1 Absorptionskärna**
Absorptionskärnan av cellulosafloff absorberar vätskan snabbt.
- 2 Spärrskikt**
Det undre spärrskiktet av plast är anti-glidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvätning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.
- 3 Ytskikt**
Heltäckande mjukt ytskikt av non-woven som även täcker runt sidorna för att förhindra att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.



Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa

Spärskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Produkten är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:

Skonsam mot huden

Snabb absorption

Många användningsområden

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått.	Färg	Förp.
MoliNea normal 40x60 cm	161 221	21 gr	40x60 cm	Grön	6x30 st
MoliNea normal 60x60 cm	161 321	32 gr	60x60 cm	Grön	4x30 st
MoliNea normal 60x90 cm	161 521	50 gr	60x90 cm	Grön	4x30 st