


Hydrofilm® roll

Transparent film på rulle

Hydrofilm roll är ett osterilt, självhäftande transparent filmförband för enkel förbandsfixering.

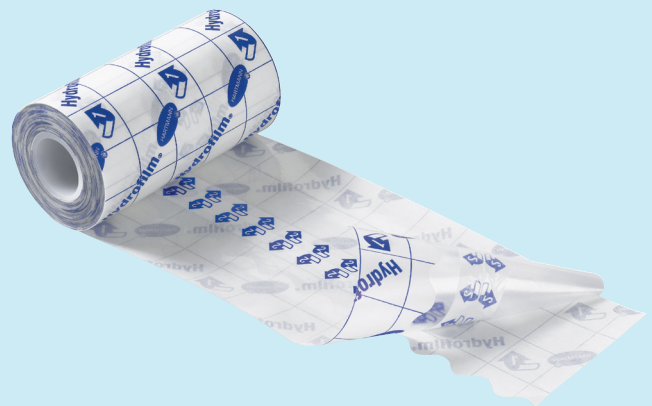

- 1 Vattentät och ogenomtränglig för bakterier
- 2 Kan enkelt klippas till nödvändig längd
- 3 Transparent

Fördelar:

Enkel hantering
Kolofoniumfri
Transparent



Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen. Eftersom Hydrofilm roll stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch. Häftmassan i filmförbandet har kraftig häftförmåga för att förbandet ska kunna sitta stadigt under längre tid, men kan ändå tas bort utan att lämna några klisterrester.

Material

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Kolofoniumfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Används för fixering av förband på alla områden, speciell när det är viktigt att kunna inspektera primär förbandet. Ger även säker fixering av katetrar och dräneringsslangar.

Kontraindikationer:

Hydrofilm roll ska inte användas på infekterade, blödande eller vätskande sår.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® roll	5 cm x 10 m	685 790	1 st	24 Afp
Osteril, enstycksförpackad	10 cm x 2 m	685 791	1 st	24 Afp
	10 cm x 10 m	685 792	1 st	32 Afp
	15 cm x 10 m	685 793	1 st	20 Afp