


Omniplast®

Kirurgisk tekstiltape med zinkoxid

I mange plejetilfælde behøves en tape, som bliver siddende ordentligt på plads. Det kan dreje sig om forbindingsfiksering eller sikring af kanyler og sonder. Omniplast bliver siddende og tillader samtidig huden at ånde, eftersom klæberens strenger er applikeret i strenge.

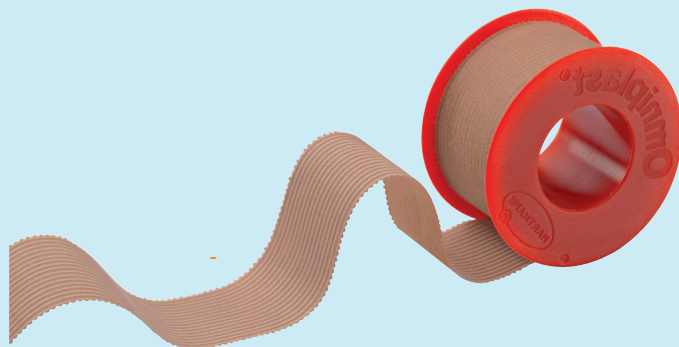

- 1 Sikker fiksering
- 2 Zinkoxid har en svagt sammentrækkende og beroligende effekt på huden
- 3 Klæberens strenger er applikeret i strenge, hvilket gør det muligt for huden at ånde
- 4 Enkel at håndtere
- 5 Stänger ute UV-strålning
- 6 Fri från kolofonium och latex

Fordele:

- Sikker fiksering
- Let at afrive
- Holder UV-stråling ude
- Behøver ikke at fjernes inden røntgen
- Kolofonium- og latexfri



Egenskaber

Omniplast er gennemtrængelig for luft og fugt, eftersom klæberen er applikeret i strenge. Tapen fæstner sikkert, men kan dog fjernes fra huden smertefrit og efterlader ingen klæberester på huden. Omniplast er let at afrive både på langs og på tværs, uden at tapen trevler. Omniplast absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser. Omniplast lader heller ikke UV-A, UV-B eller UV-C stråler fra solen trænge igennem.

Materiale

100% viskosevæv, vandafvisende.
 Klæberen er baseret på syntetisk gummi indeholdende 17% zinkoxid (ca. 14g/m²).
 Kolofonium- og latexfri. Spole af polystyren.
 Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC

Indikation

Alle former for forbindningsfiksering, selv for kanyler, sonder og katetre. Velegnet til patienter med normal hud. Kontraindikationer: Der bør udvises forsigtighed ved sart hud.

Fikseringsinstruktion

Huden skal være tør, når tapen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Omniplast® På rulle i æske	1,25 cm x 9,2 m	900 452	24 stk	10 Afp
	2,5 cm x 9,2 m	900 453	12 stk	16 Afp
	5 cm x 9,2 m	900 454	6 stk	18 A fp