




helps healing.

Snel het juiste product vinden.


Met het zwachtelassortiment van HARTMANN.
Latexvrij en veilig.

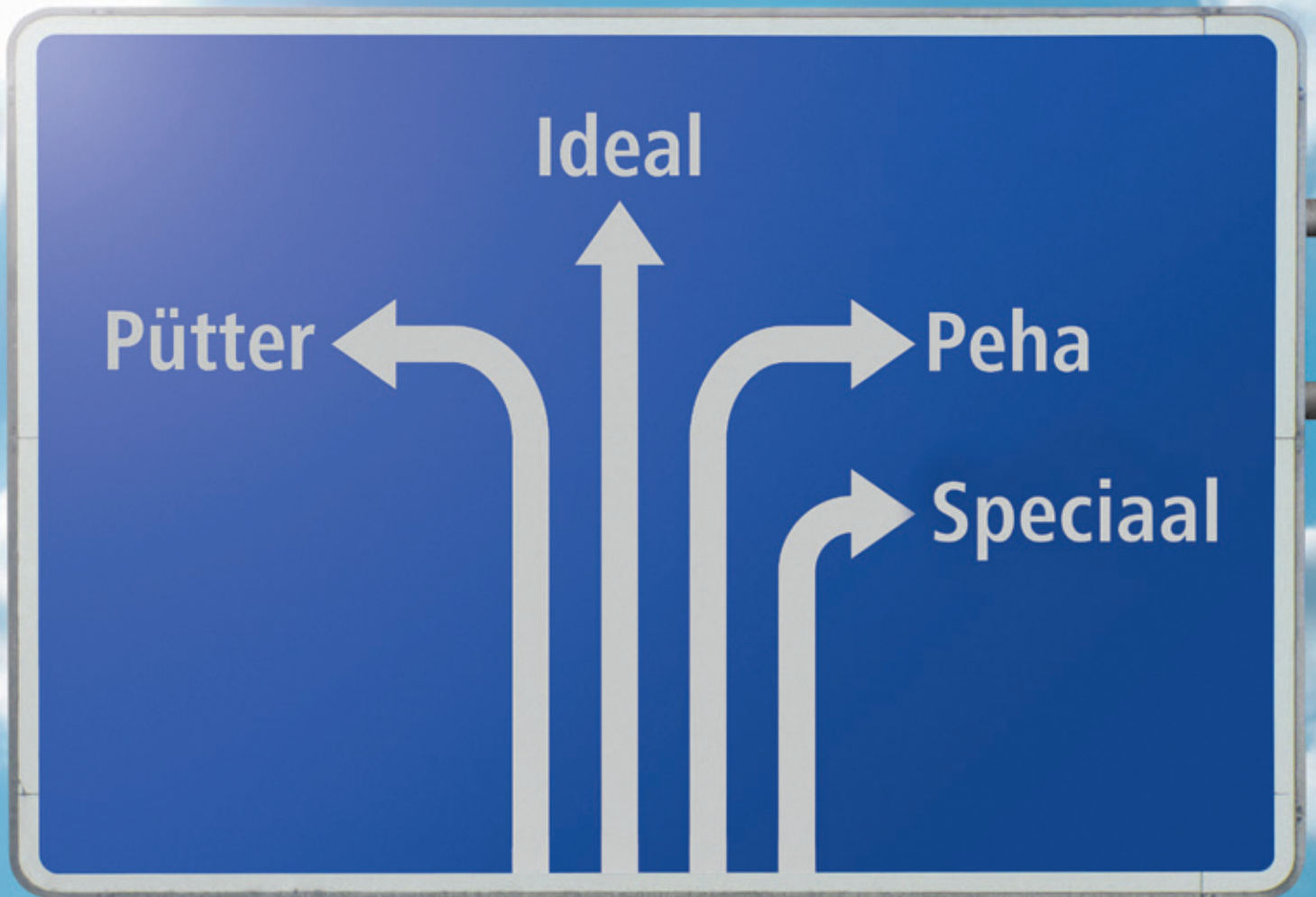

De toonaangevende producten van HARTMANN. De juiste zwachtel voor elke toepassing.

Niet per se nieuw. Maar wel opnieuw ingedeeld.

Duidelijk en overzichtelijk: De nieuwe indeling van het HARTMANN-zwachtelassortiment vereenvoudigt de keuze van de juiste zwachtel voor een bepaalde toepassing. Door de overzichtelijke indeling van de producten in vier categorieën is het ruime assortiment goed te overzien.

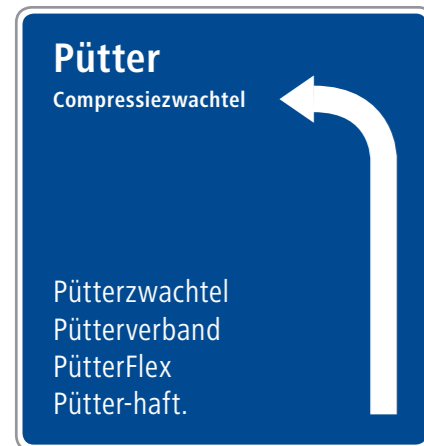

Pütter staat voor alle zwachtels met korte rek die in het kader van compressietherapie kunnen worden toegepast: van de Pütter-zwachtel tot Pütter-haft.



Ideal staat voor alle klassieke zwachtels die op grond van hun universele eigenschappen geschikt zijn voor tal van toepassingen.



Peha zijn de elastische en niet-elastische fixatiezwachtels van HARTMANN, voor het fixeren van wondverband, vulmateriaal, canules en spalken.



De speciale producten omvatten zwachtels en verbanden voor specifieke toepassingen die niet in de categorieën Compressie, Universeel en Fixatie thuishoren.

De simpelste manier om snel een keuze te maken. Het complete assortiment uit één hand.

Volledig latexvrije producten bieden betere bescherming tegen infecties.

Veiligheid staat bij HARTMANN op de eerste plaats. Om die reden beschouwen wij het **beperken van het infectierisico** in de gezondheidszorg als één van onze belangrijkste taken.

Het kiemgetal van onze zwachtels is lager dan 100 KVE/g (kolonievormende eenheden). Het infectierisico is dus geringer, omdat patiënten met minder ziektekiemen in contact komen.

Bovendien is het risico op het ontwikkelen van een latexallergie niet meer aanwezig, omdat al onze hechtende zwachtels vrij zijn van **natuurlijk latex**.

Ons toch al goede zwachtelassortiment is nu dus nog beter en **veiliger**.



Alle tijd- en kostenbesparende voordelen op een rij.

- Veilig voor verplegend personeel en patiënten met een latexallergie, omdat alle zwachtels vrij van latex zijn.
- Dankzij een gecontroleerde kiembelasting minder risico op infecties.
- Minder tijdrovend bij het bestellen en het gebruik door een overzichtelijke indeling van het assortiment.
- Veilige toepassing en tijdwinst, omdat duidelijk herkenbaar is waarvoor een product is bedoeld en wat het oplevert.
- Foutieve en dubbele bestellingen worden vermeden omdat het complete assortiment wordt geleverd door één leverancier.



Pütter. compressiezwachtels van HARTMANN.

Pütterzwachtel

Pütterzwachtels zijn extra zware zwachtels met een korte rek voor het toepassen van een tegengesteld gerichte verbandtechniek bij compressietherapie. Ze zijn verkrijgbaar als afzonderlijke zwachtel en bij speciale indicaties als Pütterverband per twee stuks. Leverbaar in verschillende uitvoeringen en breedten.



Pütterverband® Het sterke duo.



Twee beproefde, extra zware zwachtels met korte rek en een rekbaarheid van 90% in een duverpakking voor een bijzonder sterk compressieverband.

PütterFlex De dunne, sterke zwachtel.



Een extra dunne, bi-elastische zwachtel met korte rek en een rekbaarheid van ca. 90% in de lengte en daarnaast elasticiteit in de breedte voor zeer sterke compressie.

Pütter-haft De hoogwaardige, hechtende zwachtel



Pütter-haft is een hechtende, duurzaam elastische zwachtel met korte rek die aan beide zijden hecht, zodat hij goed op zijn plaats blijft, en een rekbaarheid van 60% voor sterke compressie.

Pütter	Eigenschappen	Voordelen
Pütterzwachtel®	beproefd	veilig, duurzaam
Pütterverband®	dubbel beproefd	twee stuks voor één verband
PütterFlex	bi-elastisch	eenvoudige toepassing, hoog draagcomfort
Pütter-haft	hechtend	blijft goed zitten



Ideal. universele zwachtels van HARTMANN.

Idealzwachtel

De klassieke HARTMANN-Idealzwachtel conform DIN 61632-IB-S is een elastische textielzwachtel met een korte rek. Dankzij de goede gebruikseigenschappen is deze zwachtel geschikt voor tal van toepassingen.



Idealast® De elastische mengzwachtel.



Idealast is een duurzaam elastische Idealzwachtel met een korte rek en een rekbaarheid van ca. 80%, die dankzij de lange levensduur zeer economisch in het gebruik is.

Idealast®-haft De hechtende zwachtel.



Idealast-haft is een hechtende, duurzaam elastische zwachtel met een rekbaarheid van 90% voor een verband dat goed blijft zitten.

Idealast®-haft Color De fleurige, hechtende zwachtel.



Idealast-haft Color is een gekleurde, hechtende, duurzaam elastische Idealzwachtel met een rekbaarheid van 80% en een korte rek voor een vrolijk verband dat goed blijft zitten.

Idealflex® De lichte zwachtel.



De lichte Idealflex is een enkelvoudige duurzaam elastische universele zwachtel met een rekbaarheid van ca. 80% voor economisch gebruik.

Ideal	Eigenschappen	Voordelen
Idealzwachtel	100% katoen	huidvriendelijk, duurzaam
Idealast®	duurzaam elastisch weefsel	vormvast
Idealast®-haft	hechtend	blijft goed zitten
Idealast®-haft Color	hechtend, gekleurd (blauw, rood)	blijft goed zitten
Idealflex®	lichte kwaliteit	luchtdoorlatend



Peha.

Fixatiezwachtels van HARTMANN.

Peha-haft®

Peha-haft bevat geen latex, acrylaat of chloor en kan worden gebruikt voor allerlei fixatiedoelinden. Deze hechtende, elastische fixatiezwachtel is vooral geschikt voor het fixeren van wondverband, vulmateriaal, canules e.d. op gewrichten en ronde of conische lichaamsdelen.



Peha-haft® Color

De fleurige, flexibele zwachtel

Peha-haft Color is een hechtende, elastische fixatiezwachtel met een rekbaarheid van ca. 100% die in twee kleuren verkrijgbaar is voor een vrolijk verband dat goed blijft zitten.



Peha-last®

De elastische, zachte zwachtel

Peha-last is elastisch verbandgaas van zuiver katoen met een rekbaarheid van 65%. Het verband absorbeert goed en is zeer huidvriendelijk.



Peha®-verbandgaas

De universele, traditionele zwachtel

Peha-verbandgaas van niet-elastisch weefsel is uitermate huidvriendelijk en ademend, beperkt het afknellen en wordt vaak toegepast als noodverband in het kader van eerste hulpverlening.



Peha-crepp®

De superelastische zwachtel

Peha-crepp is een superelastische fixatiezwachtel met een hoog katoengehalte en rekbaarheid van ca. 160%. Deze zwachtel is bij uitstek geschikt voor gebruik op lastige plaatsen en patiënten met een gevoelige huid.



Peha®-Lastotel®

De zeer elastische, duurzame zwachtel

Peha-Lastotel is een zeer elastische fixatiezwachtel met een rekbaarheid van ca. 140% voor allerlei fixatiedoelinden die dankzij het duurzame weefsel ook zeer geschikt is voor het bevestigen van spalken.

Peha	Eigenschappen	Voordelen
Peha-haft®	hechtend	betrouwbare fixatie
Peha-haft® Color	hechtend, gekleurd (blauw, rood)	betrouwbare fixatie
Peha®-verbandgaas	niet rekbaar	beperkt afknellingen
Peha-last®	100% katoen	huidvriendelijk
Peha-crepp®	crêpestructuur	blijft goed zitten
Peha®-Lastotel®	zeer elastisch	zacht, dicht, duurzaam



Speciaal.

Speciale producten van HARTMANN.

Lange rek/compressie



Lastodur® strong

De sterke, superrekbare zwachtel

Lastodur strong is een duurzaam elastische zwachtel met een lange rek en sterke, goed te doseren compressieve eigenschappen voor soepele, duurzame verbanden.



Lastodur® soft

De zachte, superrekbare zwachtel

Lastodur soft is een duurzaam elastische zwachtel met lange rek met beperkte, goed te doseren compressieve eigenschappen voor soepele, duurzame verbanden.

Zinklijm



Varolast®

De tweedimensionale zwachtel

Varolast is een gebruiksklare, in de lengte en in de breedte rekbare zinklijmzwachtel waarmee ook op anatomisch lastige plaatsen een verband exact kan worden aangelegd.



Varolast® plus

De extra vochtige zwachtel

Varolast plus is een extra vochtige zinklijmzwachtel met een zachte, gelijkmatig verdeelde zinklijmlaag, die zonder in te snijden of af te knellen kan worden aangelegd.

Gewatteerde zwachtel



Rolta® soft

De gewatteerde zwachtel

Rolta soft is een gewatteerde synthetische zwachtel van licht volumineus, uitermate zacht en huidvriendelijk materiaal voor een lichte wattering, die ook door een gevoelige huid wordt verdragen.

Buiszwachtels



Stülpa®

De fijnmazige zwachtel

Stülpa is een naadloze buiszwachtel die zowel in de lengte als in de breedte zeer rekbaar is en voor tal van toepassingen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor fixatie-, extensie-, zinklijm en gipsverbanden.



Stülpa®-fix

De grofmazige zwachtel

Stülpa-fix is een zeer elastische, grof gebreide netbuiszwachtel met een hoog katoengehalte voor snelle fixatie van wondverbanden op alle delen van het lichaam.



Coverflex®

De bedekkende zwachtel

Coverflex is een duurzaam elastische, huidvriendelijke buiszwachtel van dicht geweven, zijdeachtig materiaal met ingeweven elastaandraden, die zowel droog als vochtig kan worden toegepast.



Lastogrip®

De ondersteunende zwachtel

Lastogrip is een duurzaam elastische buiszwachtel voor het ondersteunen en fixeren met gelijkmatige, matig compressieve eigenschappen, die in het wit en in huidskleur verkrijgbaar is.



helps healing.

PAUL HARTMANN B.V.
Kerkenbos 11 - 03d . 6546 BC Nijmegen
Tel. (024) 711 2000 . Fax. (024) 377 82 84
www.paulhartmann.nl . algemeen@paulhartmann.nl

**Meer informatie over onze producten
vindt u op www.paulhartmann.nl**