


MoliCare® Premium Form

Kroppsformat skydd vid medelstor till mycket stor inkontinens.

MoliCare Premium Form är ett kroppsformat inkontinensskydd som fixeras med hjälp av fixeringsbyxa. Skyddets textilliknande ytskikt gör det bekvämt att bära och den effektiva absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliCare Premium Form finns i sju olika absorptionskapaciteter för att erbjuda ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.

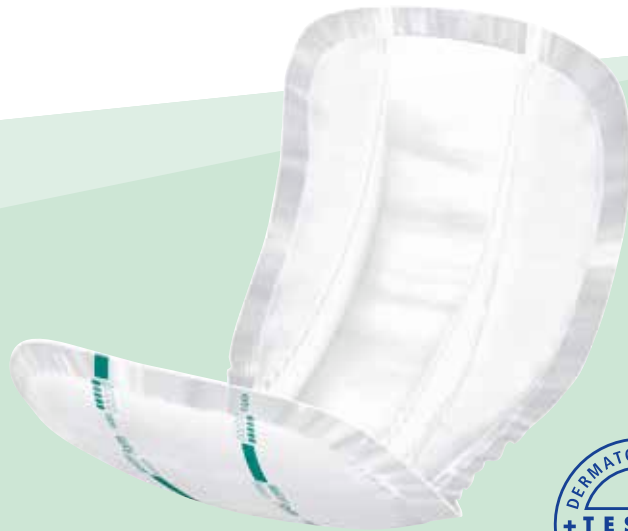

- 1 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 Advanced Dry Zone**
Advanced Dry Zone ger en unik känsla av torrhet mot huden. Yttorrheten förbättras med 30%* även under tryck vilket hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat.
*Paul HARTMANN AG intern testmetod
"Återvätning efter ABL"
- 3 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 4 Läckagebarriärer**
Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.
- 5 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.
- 6 Diskret utsida**
Utsidan är vit med diskret färgkodning, produktnamn och droppmarkering för att underlätta val av rätt produkt.
- 7 Längsgående våtindikator**
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.



Fördelar:

Hög yttorrhet
Längsgående läckagebarriärer
Skonsam mot huden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat

Ytskikt: Polypropen non-woven

Elastik: Lycra

Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Storlek	Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Normal	168 118	52,5 cm	51 gr	1 155 ml	4x28 st
Normal plus	168 018	62 cm	59 gr	1 483 ml	4x28 st
Extra	168 218	62 cm	64 gr	1 626 ml	4x28 st
Extra plus	168 318	69 cm	94 gr	2 377 ml	4x28 st
Super	168 718	69 cm	99 gr	2 494 ml	4x28 st
Super plus	168 918	69 cm	106 gr	2 777 ml	4x28 st
Maxi	168 618	69 cm	129 gr	3 239 ml	4x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info