


MoliNea normal

Hygieneunderlag

MoliNea normal hygieneunderlag er tiltenkt å brukes som et komplement til inkontinensprodukter der det er risiko for lekkasje.

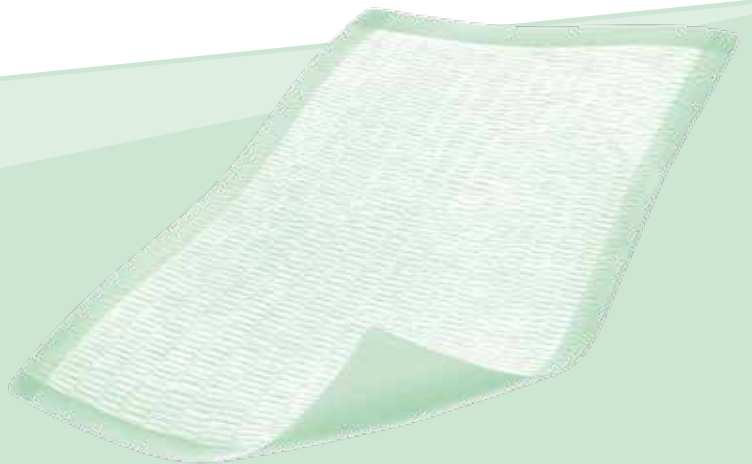

- 1 Absorpsjonskjerne**
Absorpsjonskjernen av cellulose absorberer væsken raskt.
- 2 Undersiden**
Undersiden av plast er antisklibehandlet og beskytter seng og stol mot gjennomfukting. Underlaget er forseglet langs alle fire kanter slik at væske ikke kan trenge ut.
- 3 Overflate**
Heldekkende myk overflate av non-woven som også dekker rundt sidene for å hindre at huden kommer i kontakt med sperresiktet av plast.



Material:

Absorpsjonskjerne: Cellulose

Underside: Polyeten

Overflate: Polypropen non-woven

Produktet er CE-merket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordeler:

Skånsom mot huden

Rask absorpsjon

Mange bruksområder

Sortiment	Art.nr.	Vekt	Mål	Farge	Forp.
MoliNea normal 40x60 cm	161 221	21 gr	40x60 cm	Grønn	6x30 stk
MoliNea normal 60x60 cm	161 321	32 gr	60x60 cm	Grønn	4x30 stk
MoliNea normal 60x90 cm	161 521	50 gr	60x90 cm	Grønn	4x30 stk