


MoliCare Premium Bed Mat

Hygienunderlägg

MoliCare Premium Bed Mat hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.

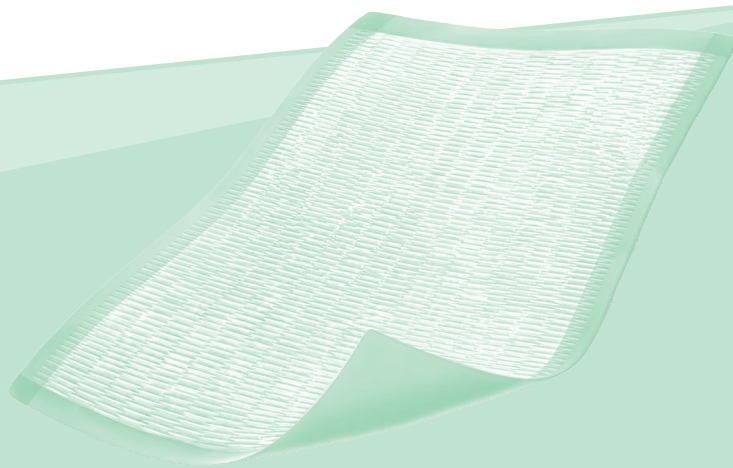

1 Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafloff absorberar vätskan snabbt.

2 Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är anti-glidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvätning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

3 Ytskikt

Heltäckande mjukt ytskikt av non-woven som även täcker runt sidorna för att förhindra att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.

Fördelar:

Skonsam mot huden

Snabb absorption

Många användningsområden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

CE-märkt enligt EU-Förordning 2017/745

MDR

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått.	Färg	Förp.
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 40x60 cm	161 061	21 gr	40x60 cm	Grön	6x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 60x60 cm	161 063	32 gr	60x60 cm	Grön	4x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 60x90 cm	161 065	50 gr	60x90 cm	Grön	4x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 40x60 cm	161 066	30 g	40x60 cm	Grön	6x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x60 cm	161 068	46 g	60x60 cm	Grön	4x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x90 cm	161 070	77 g	60x90 cm	Grön	4x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x180 cm med bäddflikar	161 072		60x180 cm	Vit	4x30 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info